

Sistema desechable para terapia intravenosa

Easypump[®] ST/LT

Consideraciones importantes

Espere hasta que el dispositivo Easypump ST/LT (tratamiento a corto/largo plazo) llegue a la temperatura ambiente para usarlo.

- Espere entre 6 y 12 horas hasta que el dispositivo alcance la temperatura ambiente para comenzar a administrar la terapia. Si la temperatura de la solución está más fría que la temperatura ambiente, es posible que la administración de la terapia tome más tiempo.
- Para evitar esto y a modo de recordatorio, saque la próxima dosis del refrigerador antes de comenzar la administración de la terapia del día. Si la dosis de su terapia intravenosa dura menos de 6 a 8 horas, puede sacar dos dosis del refrigerador por vez.
- **NO CALIENTE** el dispositivo Easypump ST/LT con la ayuda de una fuente de calor, como un horno microondas, colocándolo en agua caliente ni al rayo del sol. Aplicar estas técnicas puede afectar el funcionamiento del dispositivo y la velocidad de administración del medicamento (lo que se conoce como tasa de perfusión o goteo).

Preparación

Para obtener información detallada, consulte el campo quirúrgico con instrucciones sobre la técnica SASH (lavado salino, administración, lavado salino y lavado con solución heparinizada).

1. **Limpie** el área de trabajo.
2. **Lávese** las manos.
3. **Reúna** los suministros:
 - Dispositivo Easypump ST/LT (a temperatura ambiente)
 - Paños con alcohol
 - Solución salina para enjuague (dos jeringas prellenadas con solución salina)
 - Una jeringa prellenada con solución heparinizada (si se solicita)
 - Envase para desechos
4. **Lea** la etiqueta del medicamento para corroborar lo siguiente:
 - que el nombre del paciente sea el correcto;
 - que la medicación y dosis sean los correctos;
 - que la medicación no esté vencida;
 - la duración de la terapia;
 - que la solución sea transparente, de color uniforme y que no tenga ninguna partícula visible.

Enjuague el catéter

Para obtener información detallada, consulte el campo quirúrgico con instrucciones sobre la técnica SASH.


Administre el medicamento

1. Afloje el tapón del extremo de la sonda. Asegúrese de que el tapón no se salga, a fin de evitar que el extremo de la sonda se contamine. Abra la pinza de la sonda y espere hasta que salga una gota de medicación por su extremo. Tan pronto como vea la primera gota de medicación, pince la sonda.

Es muy importante que esté atento al extremo de la sonda. Evite que toque cualquier superficie, a fin de que no se contamine.



2. Frote el tapón para inyección del catéter con un paño con alcohol limpio durante 15 segundos y, luego, espere hasta que se seque al aire durante 5 segundos. Asegúrese de no tocar la parte superior del tapón para inyección con los dedos.

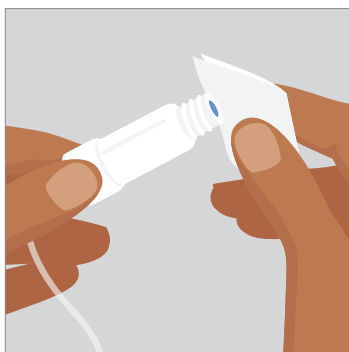

3. Saque el tapón de protección del extremo de la sonda. Al hacerlo, asegúrese de no tocar el extremo estéril con los dedos. Conecte el extremo de la sonda de la bomba al tapón para inyección del catéter. Para ello, inserte el extremo en el tapón y, luego, hágalo girar en sentido de las agujas del reloj hasta que quede en su lugar.

4. Abra la pinza en la sonda para que pase la medicación. Durante la administración, coloque el dispositivo Easy Pump en un bolsillo, sobre una superficie cercana, o bien en un estuche. No use el dispositivo si se está bañando, duchando o nadando.
5. La medicación se debe administrar durante _____ minutos/horas. Además, el farmacéutico o enfermero responsable de los servicios intravenosos en el hogar (Coram) de Coram® CVS Specialty® le informará cuánto debe durar la terapia. No hay ninguna alarma que le indique que la medicación se terminó de administrar. Controle el globo para ver que su tamaño disminuya. Si es así, significa que la medicación se está administrando correctamente. Cuando el globo esté totalmente chato, la terapia intravenosa habrá terminado.
6. Una vez terminada la terapia, cierre la pinza en la sonda.
7. Desconecte la sonda del tapón para inyección del catéter. Deseche todo el sistema Easy Pump. Siga cualquier otra instrucción que le indique el enfermero.

Enjuague el catéter

Para obtener información detallada, consulte el campo quirúrgico con instrucciones sobre la técnica SASH.

Solución de problemas

Si nota que la bomba no está funcionando, controle lo siguiente:

- que la bomba esté a temperatura ambiente;
- que la pinza color blanco en la sonda esté abierta (es decir, que se desplace fácilmente por toda la sonda);
- que todas las pinzas del catéter estén abiertas;
- que no haya torceduras en la sonda de la bomba.

Para asegurarse de que el catéter funcione según lo previsto, siga las indicaciones del enfermero.

Recurso: Sistema de bomba de infusión elastomérica Easy Pump® ST/LT: Guía para el paciente. B. Braun Medical Inc.
<https://www.bbraunusa.com/en/products/b4/easypump-st-lt.html>.

Esta información no sustituye la consulta ni el tratamiento médico. Comuníquese con su médico o proveedor de servicios de salud para analizar esta información y realizar cualquier pregunta relacionada. Coram no asume ninguna responsabilidad por la información provista ni por cualquier diagnóstico o tratamiento realizados como resultado de esta información.

Su privacidad es importante para nosotros. Nuestros empleados están capacitados para administrar correctamente su información de salud privada.
©2020 Coram LLC. Todos los derechos reservados. 75-51712BS 070120