

## Guía para la activación

# Sistema contenedor Mini-Bag Plus


### Antes de comenzar

Antes de comenzar, debe seguir algunos pasos importantes. Consulte el material instructivo sobre el método SASH para obtener más detalles. Tenga también a mano la *Guía para la administración de infusiones por gravedad*.

1. **Limpie** el área de trabajo.
2. **Lávese** las manos.
3. **Reúna** los suministros:
  - Bolsa con el medicamento, a temperatura ambiente.
  - Portasueros.
  - Línea de administración intravenosa.
  - Capuchón protector esterilizado, si se infunde más de una vez al día.
  - Jeringas precargadas para la salinización.
  - Jeringas precargadas con heparina, si lo indica el profesional de la salud.
  - Toallitas con alcohol.
4. **Revise** lo siguiente en la etiqueta del medicamento:
  - El nombre del paciente es correcto.
  - El medicamento y la dosis son correctos.
  - El medicamento no está vencido.
  - El tiempo que demora la infusión.

### Prepare el medicamento

1. Doble la conexión rompible hacia arriba y hacia abajo para romper el precinto que se encuentra entre la bolsa y el adaptador del vial.

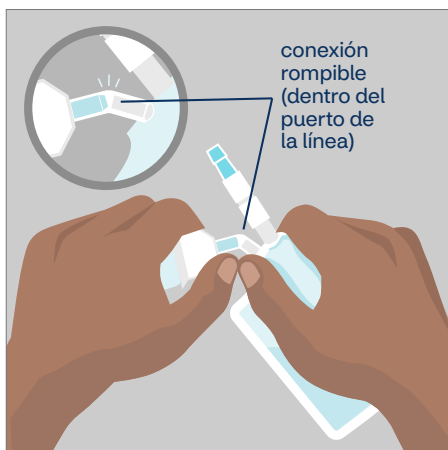

2. A continuación, sujete la bolsa con el vial colocado en la parte de abajo. Presione la bolsa para impulsar la solución hacia el vial, hasta que esté lleno hasta la mitad. Mientras mantiene el vial conectado a la bolsa, agítelo suavemente hasta disolver todo el medicamento en polvo.



3. Invierta la bolsa de modo tal que el vial quede por encima. Presione la bolsa para permitir que pase aire hacia el vial. Luego suelte la bolsa para que el medicamento pase del vial a la bolsa. Repita este paso hasta que no quede medicamento en el vial. No quite el vial.

**Nota:** Es normal que quede una cantidad muy pequeña de líquido en el vial que no circule hacia la bolsa.



**Nota:** Consulte en la *Guía para la administración de infusiones por gravedad* cuáles son los pasos que debe seguir a fin de preparar el medicamento para su administración.

4. Cuando ya no quede medicamento en el vial, cuelgue la bolsa en el portasueros. Asegúrese de que el portasueros esté completamente extendido para que el medicamento quede por encima de la línea del catéter.

## Cebe la línea

1. Quite la línea del envoltorio y extiéndala por completo. Cierre la pinza reguladora en la línea. De esta manera, se evitará la circulación del medicamento.
2. Retire la cubierta protectora de la línea de administración intravenosa que se encuentra en la parte de abajo de la bolsa. Asegúrese de no tocar con los dedos el extremo expuesto. A continuación, retire la cubierta protectora del punzón

en el extremo de la línea. Asegúrese de no tocar el punzón; mantenga los dedos sobre la cámara de goteo (vea la imagen de la izquierda).

3. Inserte el punzón en el puerto de la bolsa con el medicamento, girándolo y empujándolo al mismo tiempo.
4. Apriete suavemente la cámara de goteo de la línea y suéltela. Repita este paso la cantidad de veces que sea necesario para que la cámara se llene hasta la mitad con la solución.
5. Abra la pinza reguladora en la línea. Gire el regulador hasta que el medicamento comience a caer en la cámara de goteo.
6. Observe cómo el medicamento avanza por la línea de administración hasta que se forma una gota de líquido en el extremo. Cierre la pinza reguladora para detener la circulación del medicamento. El tubo ya está preparado y listo para usar.
7. Configure el regulador en la velocidad de goteo deseada. La velocidad que le corresponde es \_\_\_\_\_ ml/hora.

## Lave el catéter

Lave el catéter antes de administrar el medicamento. Consulte el material instructivo sobre el método SASH para obtener más detalles.

## Administre el medicamento

1. Use una toallita con alcohol nueva para frotar el tapón de inyección del catéter durante 15 segundos y, luego, espere 5 segundos hasta que se seque.
2. Asegúrese de no tocar con los dedos la parte superior del tapón de inyección mientras lo limpia.
3. Retire la cubierta que se encuentra en el extremo de la línea de administración intravenosa. Para conectar la línea de administración intravenosa al tapón de inyección, empuje y gire el extremo de la línea en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien sujetado.

4. Abra la pinza reguladora que está en la línea de administración. Comience la infusión. Cunte las gotas de la forma que le indique el enfermero. Comience con \_\_\_\_\_ ml/hora tal como se muestra en la etiqueta del medicamento. Cunte las gotas y ajuste el regulador según corresponda. Repita este procedimiento hasta alcanzar la cantidad de ml/hora que se indica en la etiqueta del medicamento.
5. El medicamento se infundirá en, aproximadamente, \_\_\_\_\_ minutos/horas. Controle la infusión cerca del final de este lapso, para poder detener la circulación del líquido. Cuando la bolsa esté vacía, pero todavía haya líquido en la cámara de goteo, regule o cierre rápidamente la pinza en la línea para detener la circulación del líquido.
6. Retire la línea de la tapa de inyección del catéter. Si el proceso de infusión se llevará a cabo más de una vez por día, coloque un capuchón esterilizado en el extremo de la línea. De esta forma, la línea se mantendrá estéril y se podrá usar en la próxima infusión. No permita que la línea quede colgando sobre el suelo. Enrosque la línea y cuélguela del portasueros para evitar que toque el suelo.

## Lave el catéter

Lave el catéter después de administrar el medicamento. Consulte el material instructivo sobre el método SASH para obtener más detalles.

## Solución de problemas

Problema de la bomba	Consejo para la solución de problemas
El líquido no circula hacia el vial del medicamento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexione la conexión rompible hacia arriba y hacia abajo varias veces para asegurarse de que esté completamente abierta.</li> <li>• Asegúrese de que el vial del medicamento esté colocado de manera recta en el adaptador (no torcido).</li> </ul>
Queda medicamento diluido en el vial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es normal que quede una cantidad muy pequeña de líquido en el vial. Si tiene dudas, consulte con su enfermero o farmacéutico.</li> </ul>
La cámara de goteo está vacía o hay aire en la línea (si le indicaron que reutilice la línea).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apriete la cámara de goteo para llenarla hasta la mitad.</li> <li>• Vuelva a cebar la línea para eliminar todo el aire.</li> </ul>

### ¿Quiere obtener más información?

Mire un video explicativo en nuestro Centro de Recursos, en [CoramHC.com](https://www.coramhc.com).

SASH (S: salinización; A: administración del medicamento; S: salinización; H: heparinización [si lo indica el médico]).

Mini-Bag Plus es una marca comercial de Baxter International Inc.

Esta información no reemplaza el asesoramiento ni el tratamiento de los médicos. Hable con su médico o proveedor del cuidado de la salud sobre esta información y sobre cualquier duda que tenga relacionada con la salud. Coram no asume responsabilidad alguna por la información brindada ni por ningún diagnóstico o tratamiento que se haga sobre la base de esta información.

Este documento incluye referencias a productos médicos de marcas comerciales o registradas de compañías no afiliadas a Coram.

© 2024 CVS Health o una de sus filiales. Todos los derechos reservados. 75-54156C 053024 ®